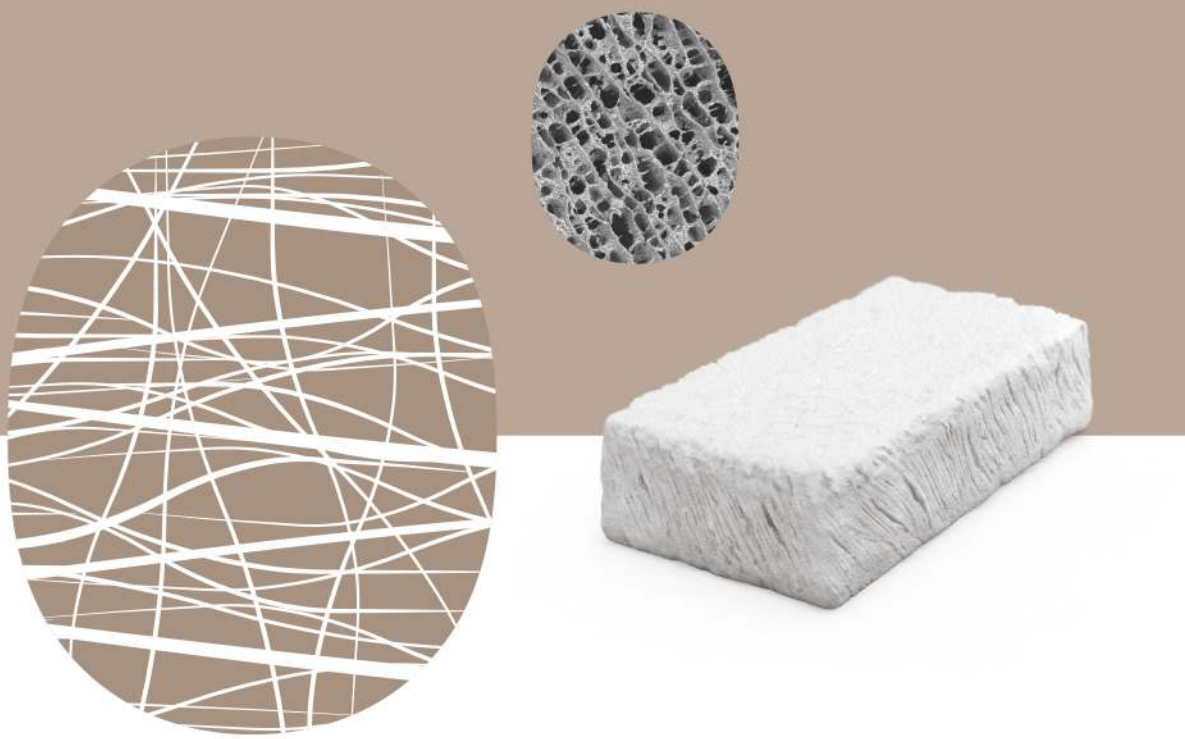


OSSIX™ Bone

Esponja Ossificante de Colágeno

Para procedimentos de regeneração óssea guiada (ROG) e regeneração tecidual guiada (RTG)


Com exclusiva e clinicamente comprovoda, Tecnologia GLYMATRIX®

Dentsply Sirona

O que é OSSIX Bone?

OSSIX Bone é um bloco ossificante tipo esponja para formação óssea verdadeira, alimentado pela tecnologia GLYMATRIX® clinicamente comprovada.

- Matriz de colágeno-hidroxiapatita reticulada de açúcar.
- Proporciona um ambiente espaçoso para vascularização, proliferação celular e maturação óssea.
- Material formador de osso que contribui para o processo de ossificação.

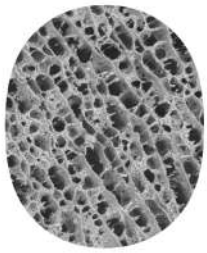

OSSIX Bone
Ampliado x200

Características e benefícios do OSSIX Bone


- Fácil de usar.
- Sofre ossificação*
- Fornece osso verdadeiro (sem resíduos).
- Sem migração de partículas.
- Custo-benefício para dentista e paciente.
- Na preservação do alvéolo e elevação do seio fechado pode ser usado sem membrana.
- Resultados previsíveis e eficácia consistente.



Ampliado x400

OSSIX Bone pode ser usado

- Para preservação do alvéolo após qualquer procedimento de extração.
- Em procedimentos de elevação do seio maxilar fechado, antes ou em conjunto com a colocação do implante.
- No aumento ósseo lateral e vertical antes ou em conjunto com a colocação do implante.
- Para corrigir defeitos ósseos em implantes com peri-implantite.
- Em defeitos ósseos periodontais ao redor dos dentes.

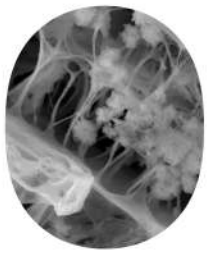

Ampliado x1700

Células que se integram no scaffold (fibras de colágeno)


OSSIX Bone - Sua nova alternativa!

Parâmetro	**OSSIX Bone**	Osso autógeno	Aloenxerto (particulado, blocos)	Xenoenxerto Particulado, blocos	Sintético
Segurança e biocompatibilidade	+++	+++	++	++	+/++
Consolidação do osso (eficácia)	+++	+++	++	+	+
Desempenho consistente	+++	+++	+	+	++
Fácil de usar	+++	++	++	++	++
Não há migração	+++	++	++	++	+
Evidência Clínica	++	+++	+++	+++	+++
Morbidade	+++	+	+++	+++	+++

* Alveolar Ridge Restoration Using a New Sugar Cross-linked Collagen-Hydroxyapatite Matrix in Canine L-shape Defects. Zubery Y, Goldlust A, Bayer T, Woods S, Jackson N, Soskolne W.A.


Consulte as instruções de uso antes de usar e para obter informações sobre indicações, contraindicações, advertências e precauções.

Usando OSSIX Bone - Esponja Ossificante de Colágeno

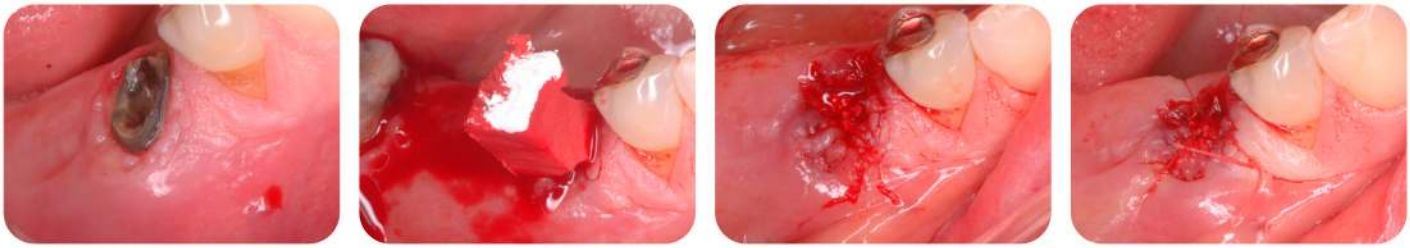

OSSIX Bone é mantido na cavidade alveolar e hidratado com o sangue do paciente até ficar totalmente embebido. Na preservação do alvéolo pode ser usado sem membrana, sutura livre de tensões.
Cortesia: Dr. Yuval Zubery, DMD, Periodontista, Ramat Hasharon, Israel

OSSIX Bone em um procedimento de preservação do alvéolo

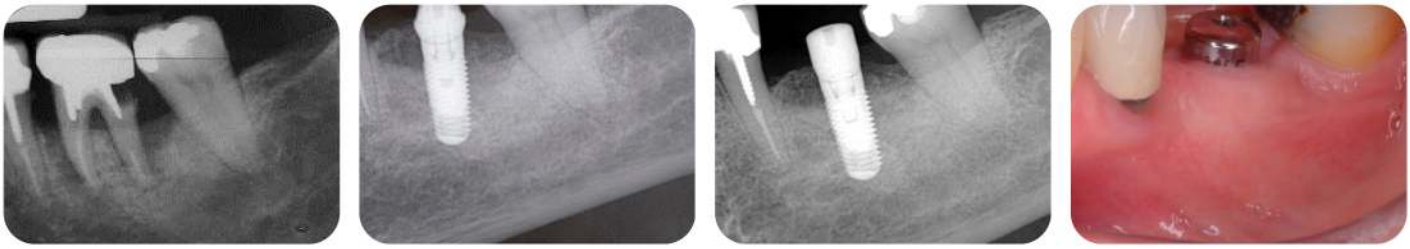


Lesão periodonto-endodôntica no dente número 19 após extração e remoção, OSSIX Bone foi colocado no alvéolo

4 meses - implante colocado em osso recém-formado com suporte de cicatrização

7 meses - o implante está totalmente integrado e pronto para ser restaurado

OSSIX Bone em um procedimento de elevação do seio maxilar trans-crestal

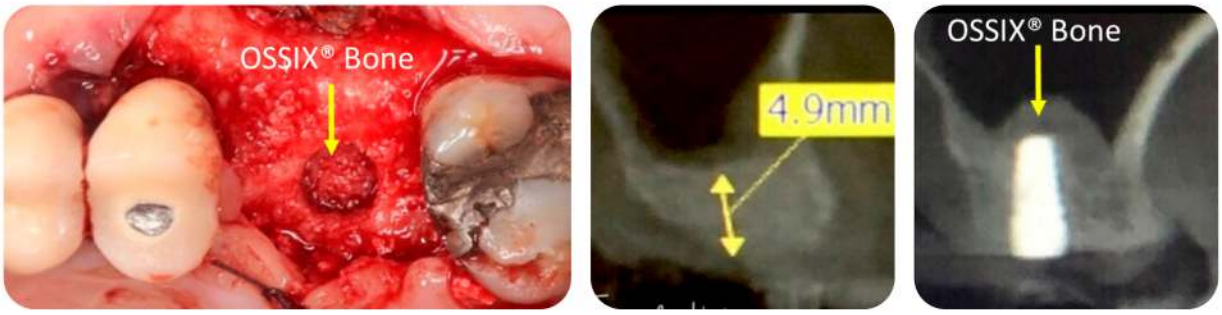


Cortesia: Dr. Matthew Fien, DDS, Deerfield Beach, FL, USA

Antes

Depois

OSSIX Bone em um procedimento de elevação do seio com osteótomo

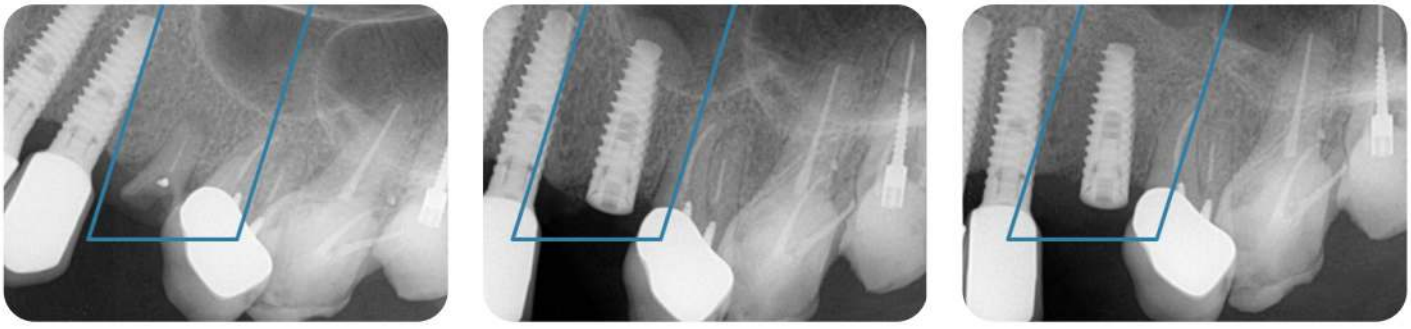

Pré-extração

Na colocação do implante

5,5 meses - o implante está totalmente integrado

OSSIX™ Bone

Esponja Ossificante de Colágeno

Para procedimentos de regeneração óssea guiada (ROG) e regeneração tecidual guiada (RTG)

OSSIX Bone está disponível em 3 tamanhos:

Descrição e tamanho	Número de referência	Número de catálogo
OSSIX Bone 5x5x5 mm (0.125 cc)	OXB0125	200125
OSSIX Bone 5x5x10 mm (0.25 cc)	OXB0250	200250
OSSIX Bone 5x10x10 mm (0.5 cc)	OXB0500	200500



Finalista DrBicuspid Dental Prêmio de Excelência de Melhor Novo Material Restaurador (2018), selecionado por um painel de leitores e especialistas





Pequeno
5 x 5 x 5 mm



Médio
5 x 5 x 10 mm



Grande
5 x 10 x 10 mm

A tecnologia GLYMATRIX imita o ciclo natural do colágeno em nosso corpo, um processo bioquímico natural chamado glicação. GLYMATRIX é o que potencializa os produtos da linha OSSIX para regeneração óssea guiada (GBR) e regeneração tecidual guiada (GTR). Clinicamente comprovado, o GLYMATRIX é coberto por mais de 100 publicações científicas, com ampla aplicação clínica em todo o mundo, abrangendo em décadas centenas de milhares de procedimentos. Essa tecnologia é objeto de várias patentes internacionais e é o resultado de anos de pesquisa sobre a glicação como mecanismo de *cross-linking*.

A tecnologia GLYMATRIX utiliza açúcar não tóxico natural para fazer a ligação cruzada das moléculas de colágeno, produzindo uma matriz de colágeno que serve como base para as soluções regenerativas OSSIX. A Dentsply Sirona continua a desenvolver novos produtos para ROG e RTG que simplificam os procedimentos e superam as principais deficiências dos biomateriais existentes por meio de soluções seguras e transformadoras.

Tudo o que fazemos é projetado para que a natureza faça a sua parte

Fabricante
Datum Dental Ltd.
1 Bat Sheva St., P.O. Box 6170,
Lod 7116003, ISRAEL
Tel: +972-8-6705400
Fax: +972-8-6705429

Importado por:
Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda
Rua Senador Carlos Gomes De Oliveira, Nº 863, Cd 02, Unidade 63 - Distrito Industrial
CEP: 88.104-785 - São José/SC
CNPJ nº 12.483.930/0001-22

www.dentsplysirona.com.br –
SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222
(Somente no Brasil)
Responsável Técnico: João Gilberto da Silva Zanuzzo - CRF/SC 8326
Registro ANVISA nº 80745400046

Para obter mais informações sobre produtos OSSIX regenerative em sua região:

www.dentsplysirona.com.br

Todos os direitos reservados. O logotipo Dentsply Sirona, GLYMATRIX e OSSIX são marcas comerciais e/ ou marcas registradas da Datum Dental Ltd, Datum Biotech Ltd, suas subsidiárias e/ ou afiliadas nos Estados Unidos e/ ou em outros países. Todos os outros nomes de empresas ou produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

1 100-ARTECCO0808 Rev.01